


# Odsávanie mlieka nemusí byť bolestivé

## Ako vybrať správnu veľkosť lievika?

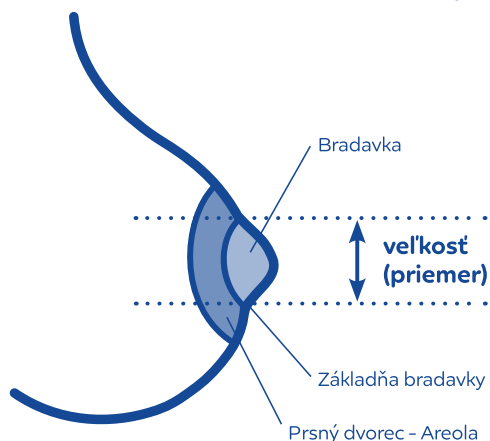

Lievik má výrazný vplyv na pohodlie a účinnosť odsávania mlieka. Výber správnej veľkosti lievika uľahčuje dosiahnutie optimálneho toku mlieka.

**Veľkosť prsníka nemusí nevyhnutne zodpovedať za veľkosť bradavky. Priemer bradavky určuje veľkosť lievika.**

Pomocou metra alebo pravítka zmerajte priemer bradavky na jej základni (cez stred), do merania sa nezahŕňa dvorec. Odčítajte veľkosť v milimetroch (mm).

**Na základe vášho merania vyberte vhodnú veľkosť bradavky:**

- priemer bradavky 13-15 mm → lievik 17 mm
- priemer bradavky 15-17 mm → lievik 19 mm
- priemer bradavky 17-19 mm → lievik 21 mm
- priemer bradavky 20-22 mm → lievik 24 mm
- priemer bradavky 23-25 mm → lievik 27 mm\*


\*Nie je súčasťou súpravy, možno zakúpiť na stránke: <https://canpolshop.com/>

### Pamätajte si!

**Ak si neviete rady ohľadom veľkosti lievika, skúste dva lieviky rôznej veľkosti a vyberte si čo najpohodlnejší.**

**Niekedy je potrebné zmerať obe prsia, môže sa stať, že budete potrebovať na jeden prsník inú veľkosť lievika ako na druhý.**

## Bezdrôtová elektrická odsávačka Hands Free

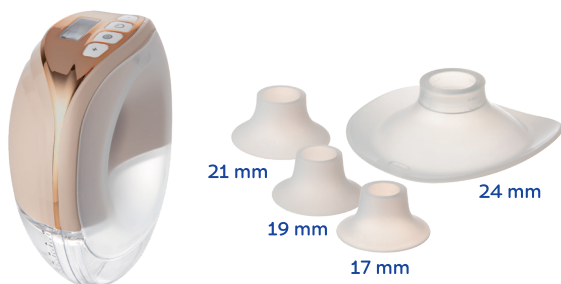

Vyskúšajte lieviky, ktoré sú súčasťou súpravy odsávačiek mlieka Canpol babies. Sada obsahuje 4 veľkosti lievika – základný, ktorý je už súčasťou odsávačky s priemerom 24 mm a 3 vymeniteľné lieviky vo veľkostiach: 17, 19 a 21 mm.

Silikónový lievik jemne priložte na prsník s bradavkou v strede.

Nastavte maximálny sací výkon, ktorý je pre vás pohodlný. Odsávanie by nemalo byť bolestivé.

Počas skutočnej fázy odsávania, po fáze stimulácie, skontrolujte, či máte lievik správnej veľkosti, ako pomôcku použite nasledujúcu grafiku.




Keď sa bradavka stiahne do tunela s časťou dvorca – **lievik je príliš veľký.**

Skúste menšiu veľkosť



Keď je bradavka v strede tunela a voľne sa pohybuje, znamená to, že lievik je správny.

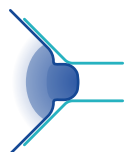

Ak sa bradavka trie o steny lievika – **lievik je príliš malý.**

Ak je základný 24 mm lievik príliš malý, vyskúšajte väčší lievik s priemerom 27 mm.\*



1. Vyberte správnu veľkosť lievika



2. Umiestnite lievik do otvoru na zmenšenie jeho priemeru.



\*Nie je súčasťou súpravy, možno zakúpiť na stránke: <https://canpolshop.com/>

# Odsávanie mlieka nemusí byť bolestivé

## Ako vybrať správnu veľkosť lievika?

Vystrihnite si kruhy a priložte si ich k Vašej bradavke. Skontrolujte, do ktorého otvoru vaša bradavka najlepšie zapadne. Mala by presne zapadnúť do otvoru bez ďalšieho priestoru okolo.

**Správna veľkosť otvoru je pre Vašu bradavku tá správna veľkosť lievika.**

Ak ste na hranici veľkostí, vyskúšajte obe veľkosti lievika a vyberte si tú najpohodlnejšiu pre vás.

### UPOZORNENIE



Ak chcete tento súbor vytlačiť, zmeňte predvolené nastavenia tlače na „mierka 100 %“, aby sa zachovala správna veľkosť kruhov.



lievik  
17 mm



13 mm



14 mm



15 mm

lievik  
19 mm



15 mm



16 mm



17 mm

lievik  
21 mm



17 mm



18 mm



19 mm

lievik  
24 mm



20 mm



21 mm



22 mm

lievik  
27 mm\*



23 mm



24 mm



25 mm